



Bath Sling

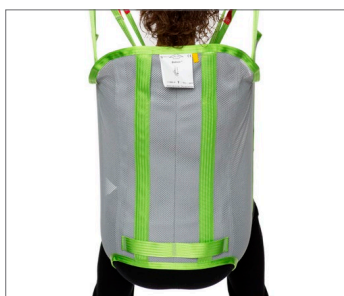

Förstärkt rygg
Snabbtorkande
Förstärkta ben

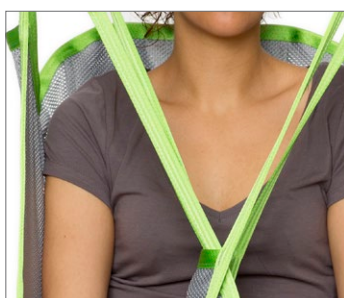

Human Cares Bath Sling kan användas i de flesta lyftsituationer och passar de flesta patienter men är mest lämplig för våta miljöer. Polyesternätmaterialen torkar snabbt efter användning vilket gör det idealiskt för bad, dusch och rehabilitering i poolområden. Bath Sling är designad för att ge patienten extra stöd och är en bra lösning för de användare med dålig bålstabilitet.

Snabbtorkande material

Bath Sling är gjord av ett polyesternet, ett mjukt och tunt material som andas och torkar snabbt. Det är idealiskt val för bad och dusch, men kan också användas i rehabiliteringspooler. Selen design skapar en upprätt sittplats som säkerställer korrekt positionering när brukaren placeras i en badstol. Eftersom materialet har viss elasticitet kan det lämnas bakom patienten under en kort tid.

Extra support

Bath Sling har en förstärkt rygg och bendelar som ger extra stöd i hela ryggområdet för de användare med dålig bålstabilitet. Den kan användas med eller utan valfritt

midjebälte som finns i ett urval av storlekar med kardborre eller spänne.

Skötsel och kvalitet

Våra selar är tillverkade enligt högsta kvalitetsstandard. De har förstärkta remmar och höghållfast nylonband runt selen för att göra dem starka nog att motstå även den mest aktiva användningen. Varje sele har en hängögglare brevid etiketten som är färgkodad för att säkerställa ett snabbt och enkelt val av rätt lyftsele. Ögglorna är även färgkodade för att enkelt bestämma önskad placering.



Tillbehör



Förlängningsband

Används för att förlänga lyftbanden och alternera lyftläge samt att hålla ihop bendelarna. Flera längder. Art. nr. 21180.*



Benpolstring och benstöd

Utmärkt för användare med känslig hud eller som har smärta. Benpolstring, art nr. 21146-S, M och L. Förstyvade benstöd, art. nr.



Midjebälte

Stäng med kardborre-band (Art. nr 25145-**) eller spänne (Art. nr. 25146-***). Finns i junior- och vuxenstorlek.



Lyftbyglar för 4-punktsupphängning

Art. nr. 55619 Lyftbygel till 4-punktsupphängning i portabel lyft.

Lyftsituationer



Till och från sängen

Lämplig för förflyttningar och ompositionering till och från sängen.



Till och från rullstolen


Lämplig för förflyttningar och ompositionering till och från rullstol.



Använd vid hygienbesök

Polyester nät fungerar bäst vid hygienbesök. Även polyestermodellen fungerar.

Skötsel och vård

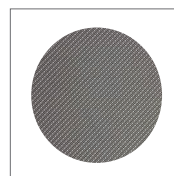


Polyester

Mjukt, tunt material som andas och torkar snabbt. Idealisk för bad eller duschning.



Polyester Nät

Mjukt, tunt material som andas och torkar snabbt. Idealisk för bad eller dusch.

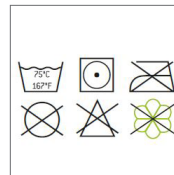

Skötsel

Skötselinstruktioner finns på selens etikett. Använd en tvättpåse godkänd för sjukhustvätt.



Tester utförda för alla relevanta ISO-standarder.

Tekniska Specifikationer

Artikel-nummer	Storlek	Färg	A	B	C
25035-JS	Junior Small		22cm / 8.7"	56cm / 22"	53cm / 22.9"
25035-JM	Junior Medium		28cm / 11"	63cm / 24.8"	58cm / 22.8"
25035-S	Small		35cm / 13.8"	76cm / 29.9"	62cm / 24.4"
25035-M	Medium		40cm / 15.7"	86cm / 33.9"	62cm / 24.4"
25035-L	Large		44cm / 17.3"	98cm / 38.6"	63cm / 24.8"
25035-XL	Extra Large		48 cm / 18.9"	102cm / 40.2"	64cm / 25.2"
Maximal användarvikt	300kg				



* Finns i olika längder: 10cm (21180-10), 15cm (21180-15), 20cm (21180-20), 25cm (21180-25), 35cm (21180-35)

** Juniorstorlekar: 40cm (25145-40B), 50cm (25145-50B), 60cm (25145-60B); Vuxenstorlekar: 60cm (25145-60), 70cm (25145-70), 80cm (25145-80), 90cm (25145-90), 110cm (25145-110), 120cm (25145-120)

*** Juniorstorlekar: 40cm (25146-40B), 50cm (25146-50B), 60cm/23.6" (25146-60B); Vuxenstorlekar: 60cm / (25146-60), 70cm (25146-70), 80cm (25146-80), 90cm (25146-90), 100cm (25146-100), 110cm (25146-110), 120cm (25146-120), 130 cm (25146-130).