




Flexibel
Fastinstallation
Aluminium



Kostnadseffektivitet och flexibla installationer. Våra skensystem erbjuder en snabb och flexibel installation. Detta innebär att borring i skenan ej behövs. Snabbare installationer skapar lägre kostnader och färre hanteringsproblem. Alla skenor är diskreta, moderna och lätta, vilket gör dem mycket enklare att installera.

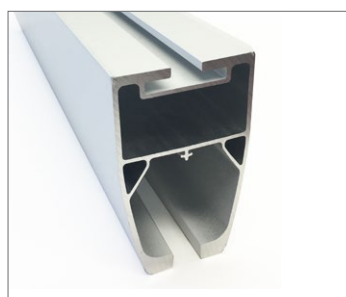

Skenprofiler

Våra skenor erbjuds i tre olika skenprofiler. P87-profilen används huvudsakligen för enkelskena eller som primärskena i ett traverssystem. Den finns i olika raka längder samt kurvor med olika radie. P87 har även möjlighet till en hyllprofil för inbyggda installationer. P120- och P180-profilerna är båda designade för att användas som sekundära skenor i ett traverssystem eller system som kräver långa avstånd mellan infästningspunkterna. De finns i längder upp till 7m/23 fot.

Diskret och mångsidig

Våra skenor är redo för skenladdning (IRC) som erbjuder kontinuerlig laddning av takliftar. Skenladdning är tillgänglig för alla raka skenor och traverssystem. Skenladdning



är möjlig längs hela skenans längd eller längs ett kortare del för laddningsstationer. Alla Human Care skenprofiler (P87, P120, P180) tillverkas med möjlighet för skenladdning, vilket innebär att du enkelt kan lägga till detta till ditt skensystem. Montering kan ske i tak, väggar eller golv oavsett höjd.

Komplett utbud av tillbehör

Våra skensystem kommer med ett komplett utbud av tillbehör för att tillgodose behoven i de flesta monteringsituationer. Vi erbjuder pendlar, rälsrullar, fästsatser, dörrstativ, och stolpar som alla garanterar att installationen blir snabb och enkel.

HUMAN CARE SWEDEN (HQ)

Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
Phone:- +46 8 665 35 00
Fax:- +46 8 665 35 10
info.se@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road
Ottawa, ON K2E 7K1
Phone: +613.723.6734
Fax: +613.723.1058
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE NEDERLAND

Eispeterweg 124
8076 PA Vierhouten
Phone: +31 577 412 171
Fax: +31 577 412 170
info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES

8006 Cameron Road, Suite K
Austin, TX 78754
Phone: +512.476.7199
Fax: +512.476.7190
info.us@humancaregroup.com

Tillbehör



Löpagnar

Diverse modeller för bärbara eller stationära lyftar. Modell nr. 20107 visas.



Travers vagnar

Diverse modeller för användning med traverssystem. Modell nr. 50170 visas.



Pendulums


Diverse modeller och höjder för montering i akustiska eller ojämna tak. Modell nr. 50190 visas



Tillbehör


Fästsats för montering av skenor på olika material. Modell nr. 50167 och 50168 visas.

Monteringsalternativ

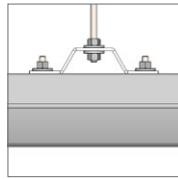


Takfäste

Används för installationer i betong- och träbjälklag eller tillsammans med pendlar. Ingen borrning krävs i skenor.

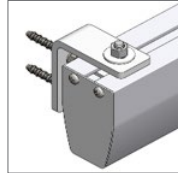


Väggfäste

När takmontering inte är möjlig kan väggfästen användas med alla skenor.

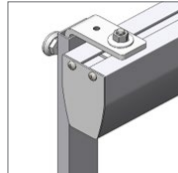

Stolpar och dörrstativ

Idealisk för tillfälligt bruk eller när modifiering av byggnadsstrukturen inte är tillåten.

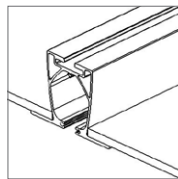

Infällt monterad

Idealisk för undertak eller undertak. Kan användas med pendlar.

Lyft kompatibilitet



Cosmos

Kompatibla med alla Cosmos modeller. Art nr. 56100, 56110, 56120



Altair

Kompatibla med alla Altair modeller. Art nr. 55200H, 55210H or 55220H.



Roomer S

Kompatibla med Roomer S. Art nr. 55300H



HeliQ

Kompatibla med alla HeliQ modeller. Art nr. 55100, 55110 or 55120

Tekniska Specifikationer

Kod	Dimensioner (LxBxH)	Kod	Dimensioner (LxBxH)	Kod	Dimensioner (LxBxH)	Kod	Dimensioner (LxBxH)
P87		P120		P180		P87	
71236	250cm x 7cm x 8.7cm 98.4" x 2.7" x 3.4"	71241	300cm x 7.3cm x 12cm 118.1" x 2.9" x 4.7"	71245	550cm x 7.3cm x 12cm 216.5" x 2.9" x 4.7"	55601	Kurva 45°
71237	300cm x 7cm x 8.7cm 118.1" x 2.7" x 3.4"	71242	400cm x 7.3cm x 12cm 157.5" x 2.9" x 4.7"	71246	700cm x 7.3cm x 12cm 275.6" x 2.9" x 4.7"	55602	Kurva 60°
71238	400cm x 7cm x 8.7cm 157.5" x 2.7" x 3.4"	71243	500cm x 7.3cm x 12cm 197" x 2.9" x 4.7"			55603	Kurva 90°
71239	550cm x 7cm x 8.7cm 216" x 2.7" x 3.4"	71244	620cm x 7.3cm x 12cm 244.1" x 2.9" x 4.7"			55604	Kurva 90° Long Raksektion 100cm
71240	700cm x 7cm x 8.7cm 275.6" x 2.7" x 3.4"						
Produktvikt: 3.2kg/7.1lb		Produktvikt: 4.4kg/9.7lb		Produktvikt: 4.9kg/10.8lb		Produktvikt: 3.2kg/7.1lb	

*We improve freedom of movement
and quality of care for people.*

www.humancaregroup.com