

Alpha Flexi Board Oval

Slät
Lättanvänd
Flexibel


PM-5040



PM-5045



Ergonomiskt utformade
handtag.

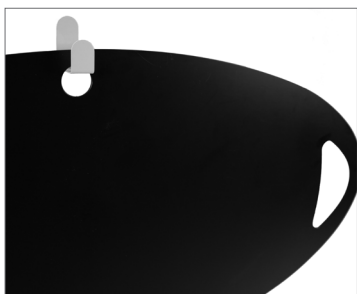

Enkla att hänga upp och
förvara.

Alpha Flexi Board Oval är tillgänglig i två olika storlekar och används för att förflytta och positionera brukare.

Alpha Flexi Board Oval L används för liggande överflyttningar, positionering i säng och applicering av lyftselar. Glidskivan har låg friktion på båda sidor och tryckfördelar ett mjukt underlag vilket underlättar vid förflyttningar.

Alpha Flexi Board Oval S används för att komma bakåt i (rull)stol, mindre repositioneringar och vid applicering av lyftselar.

Den ovala formen på glidskivan tillsammans med det tunna lågfriktionsmaterialet gör det möjligt att enkelt och smidigt placera och ta bort skivan från brukaren

Handtagen är ergonomiskt utformade och tillåter att vårdaren får ett bra grepp under användning och förflyttning. Hålet på respektive långsida är avsedda som alternativ upphängningsmöjlighet för glidskivan ex nära säng så produkten alltid är redo att användas.


Produktspecifikation

Produktnamn	Art. nr.	Dimensioner	Material
Alpha Flexi Board Oval L (2 pack)	PM-5040	85 x 40 cm	Polyeten, latexfri
Alpha Flexi Board Oval S (2 pack)	PM-5045	46 x 20 cm	Polyeten, latexfri

   = 150 kg


PETERMANN®
Technology for people of limited mobility

Human Care AB är distributör för
Petermann GmbH produkter i Sverige.

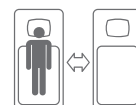

Besök www.humancaregroup.com för de senaste produktuppdateringarna.